

DERMATEC — Carta de calibración (grises + escala en mm)


IMPRIMIR A 'TAMAÑO REAL' / 100 % (NO 'ajustar a la página'), papel blanco mate, calidad alta.

Verifique con una regla que la barra de 50 mm mida exactamente 50 mm. Si no, la escala no sirve (sí los grises).


Con el acople de 8 cm la cámara ve ~14 x 10 mm: tome UNA foto por cuadro, con el cuadro llenando toda la imagen.

Perilla de luz fija (marcada con cinta) durante todas las fotos.


1) ESCALA DE GRISES (11 pasos, valor sRGB indicado debajo)



G1 (255,255,255)



G2 (230,230,230)



G3 (204,204,204)



G4 (179,179,179)



G5 (153,153,153)



G6 (128,128,128)



G7 (102,102,102)



G8 (77,77,77)



G9 (51,51,51)




G10 (26,26,26)



G11 (0,0,0)

2) ESCALA PARA CALIBRAR px/mm (50 mm, rayas cada 1 mm)

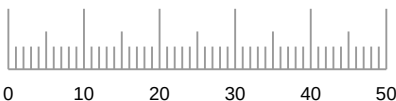

En la app: clic en dos rayas largas separadas 10 mm → escribir 10.

3) COLORES (solo para comparar antes/después; no se usan para calibrar)



Rojo



Verde



Azul



Cian



Magenta



Amarillo

4) REGISTRO

Acople usado: _____ mm Posición perilla de luz: _____ Fecha: _____

Fotos: G1 ____ G3 ____ G5 ____ G6 ____ G8 ____ G11 ____ (anote el nombre de archivo de cada una)